




Использование программы обновления БД Updater.exe


Данная программа используется для установки лицензий и обновления БД.

Программа Updater с соответствующим ярлычком на рабочем столе устанавливается на ПК автоматически в выбранный каталог установки (по умолчанию C:\Program Files\MED-Complete) при запуске файла ClientSetup.exe и выборе типа установки «Сервер»:

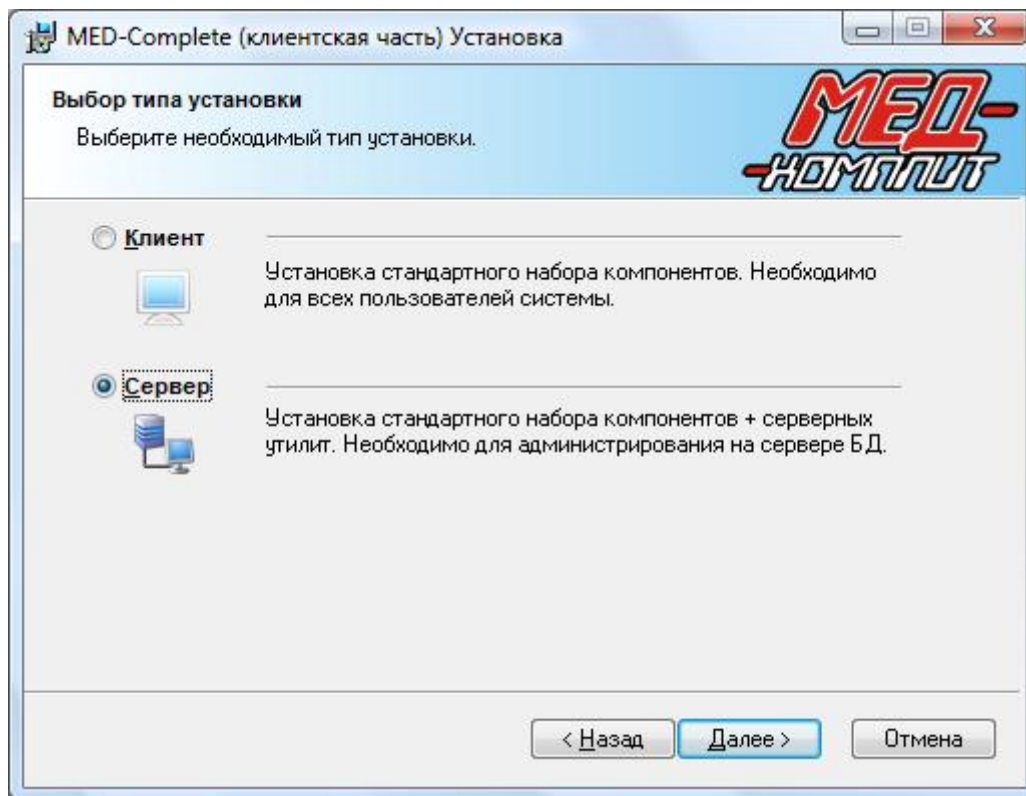


Существуют 2 возможных запуска программы Updater:


- с помощью ярлычка на рабочем столе;
- из командной строки с параметром Clinic. В случае отсутствия параметра программа выдаст сообщение об ошибке:

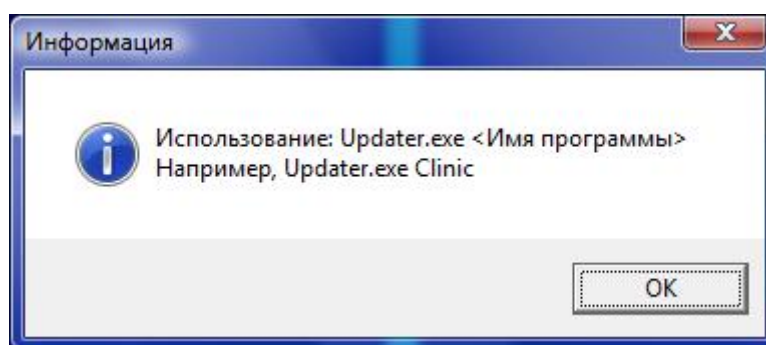

При успешном запуске программы на экране появляется окно следующего вида:

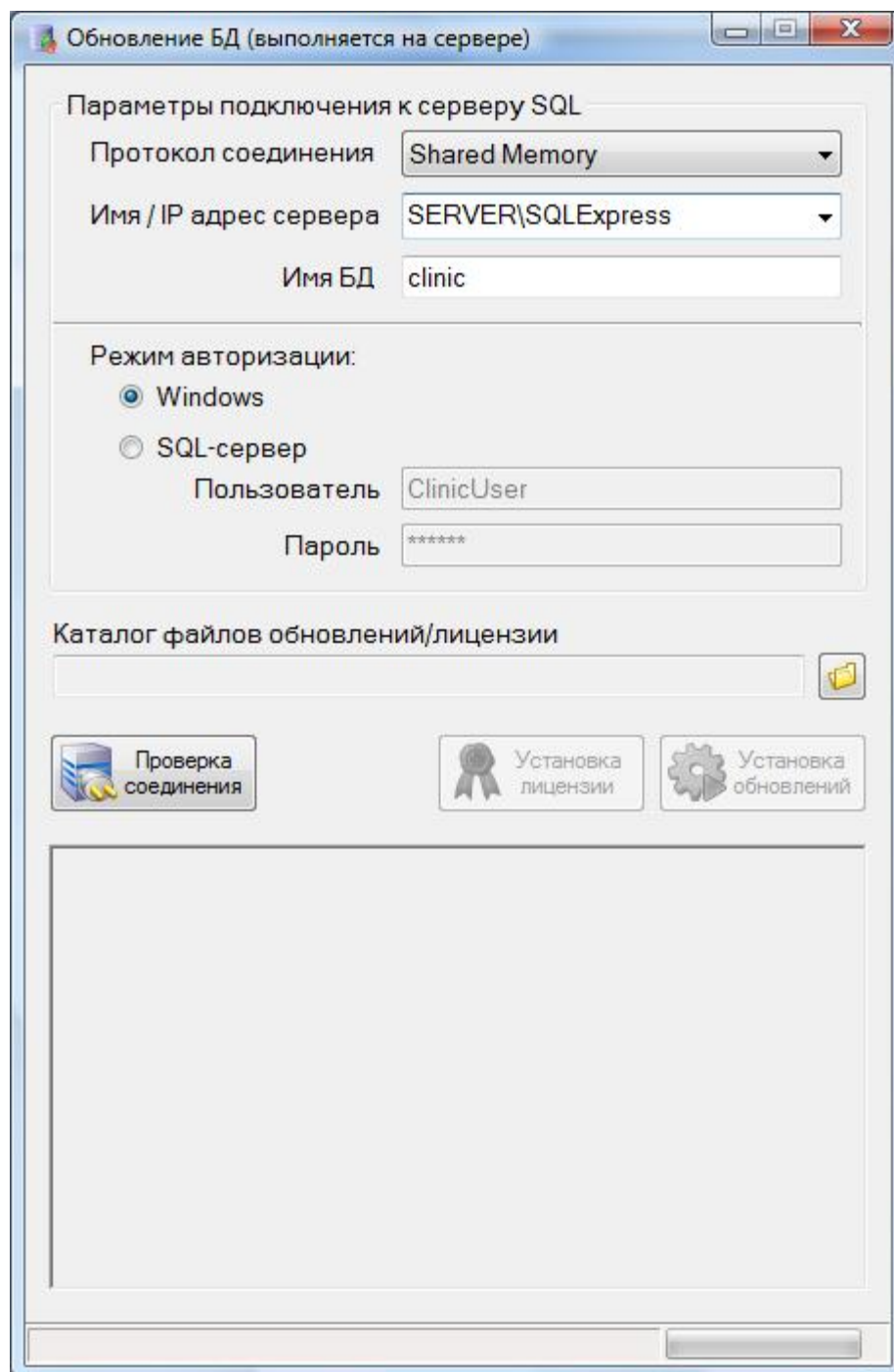


Для дальнейшей работы необходимо ввести корректные параметры для соединения с SQL Server и проверить соединение, нажав кнопку «Проверка соединения». Должно появиться окно следующего вида:

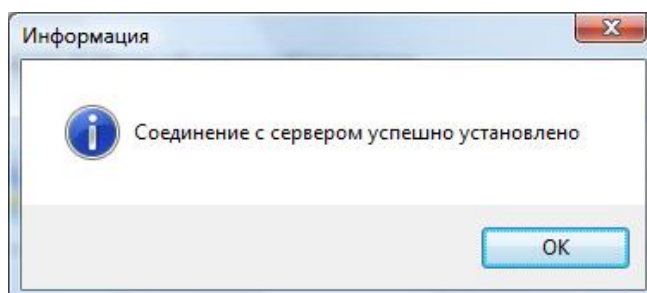


Далее необходимо выбрать каталог, содержащий файлы лицензий License.dat и Sign.xml, либо каталог, содержащий файлы обновлений с расширением .sql, нажав соответствующую кнопку справа в виде жёлтой папки. Файлы могут быть расположены в любом месте используемого компьютера: на жёстком диске, дискете, флеш-карте. Для дальнейшей установки лицензий нажать кнопку «Установка лицензий», для установки обновлений кнопку «Установка обновлений».

В случае успешной установки лицензий на экране появится окно вида:

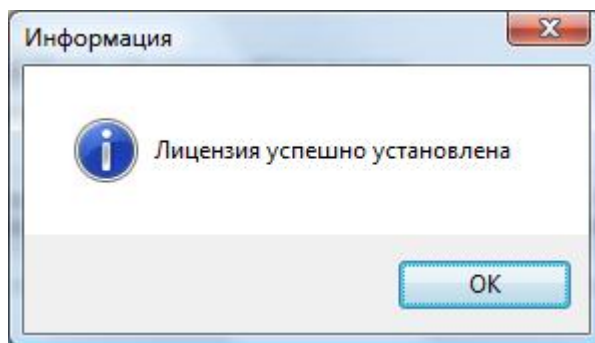

В случае успешной установки обновлений появится окно вида:

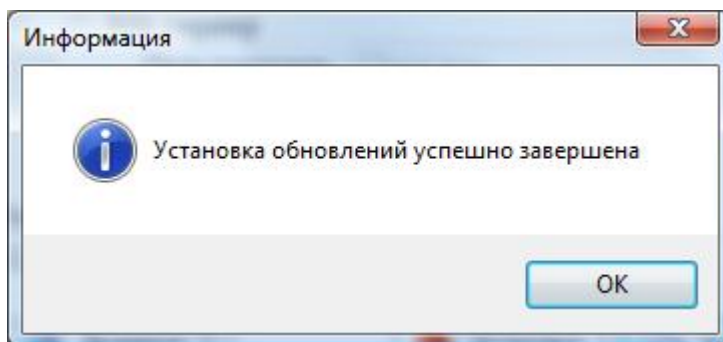

В случае возникновения каких-либо ошибок при установке лицензий или обновлений необходимо зафиксировать сообщения об ошибках на бумаге или в виде скрин-шота, сохранить в файле журнал установки и связаться со специалистами, осуществляющими техническую поддержку программного комплекса MED-Complete либо с компанией-разработчиком ООО «Офисные технологии».